

## ProCare

### Dent 40

## Nachspülmittel

#### Verwendung:

Flüssigkonzentrat. Zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten einschließlich Übertragungsinstrumenten in Miele Professional Thermo-Desinfektoren.

#### Qualitätsmerkmal:

*ProCare Dent 40* erfüllt die Vorgaben resultierend aus der europäischen Medizinproduktegesetzgebung.



Wenn ein schwerwiegender Vorfall mit diesem Produkt auftritt, ist dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

#### Produkteigenschaften:


- Verbessert und beschleunigt die Trocknung von Dentalinstrumenten bei der maschinellen Aufbereitung
- Verschleppte Alkalireste und alkalische Wässer werden neutralisiert

#### Anwendung und Dosierung:

Miele *ProCare Dent 40* ist abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Professional Thermo-Desinfektoren.

- Für die Dosierung sind geeignete Dosiergeräte zu verwenden.
- Anwendungskonzentration: 0,3 ml/l über Türdosiergerät für Nachspülmittel
- Programmwahl: Vario TD

#### Programtablauf:

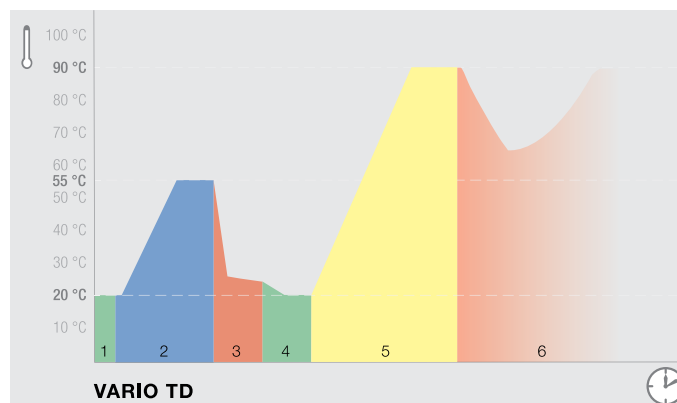

#### Verfahrensablauf Vario TD:

- 1 Vorspülen mit kaltem Wasser, um grobe Verschmutzungen (z. B. Blut) zu beseitigen
- 2 Reinigen
- 3 Neutralisieren
- 4 Zwischenspülen mit kaltem Wasser
- 5 Thermische Desinfektion bei 93 °C für 5 Minuten inkl. Schlusspülung mit *ProCare Dent 40* (Dosiertemperatur 70 °C)
- 6 Trocknen

Es wird der Einsatz von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung empfohlen, um Beläge und Wasserflecken zu vermeiden und eloxiertes Aluminium zu schützen.

#### Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Für einen Produktwechsel ist der Miele Kundendienst anzufordern.
- Die Aufbereitung muss entsprechend der Medizinproduktegesetzgebung und den geltenden Regularien mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden.
- Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Medizinprodukteherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664.
- Die Bedienungsanweisungen der Miele Professional Thermo-Desinfektoren sind zu beachten.
- Nur für gewerbliche Anwendungen.

# ProCare

## Dent 40

## Nachspülmittel

### Technische Daten:

- Dichte (20 °C): ca. 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- pH-Wert (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 0,3 ml/l: ca. 3,8

### Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

- < 5 % Phosphonate
- 15 % bis 30 % nichtionische Tenside
- Außerdem Konservierungsmittel (Methylchloroisothiazolinone / Methylisothiazolinone)

### Lagerhinweise:

- Einzuhaltende Lagertemperatur: 0 °C bis 30 °C
- Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre verwendbar
- Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol 

### Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

### Lieferbare Verpackungseinheit:

| Bezeichnung     | Gebinde     | Materialnummer |
|-----------------|-------------|----------------|
| ProCare Dent 40 | 1 l Flasche | 12 187 410     |

### Kontaktdaten:

#### Deutschland

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29,  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Luxemburg

Miele S.à r.l.  
20, Rue Christophe Plantin  
L-2339 Luxemburg  
Telefon +352 (0) 4971125  
infolux@miele.lu  
www.miele.lu/de/professional/index.htm

#### Importeur für die Schweiz

Miele AG  
Limmatstrasse 4,  
8957 Spreitenbach  
Telefon +41 (0) 56 4172000  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional

#### Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.  
Mielestraße 1  
5071 Wals bei Salzburg  
Telefon +43 (0) 50800420  
vertrieb-professional@miele.at  
www.miele.at/professional

#### Italien

Miele Italia Srl  
Strada die Circonvallazione 27,  
39057 S. Michele-Appiano (BZ)  
Telefon +39 (0) 471666319  
info@miele-professional.it  
www.miele.it/it/professional/index.htm



#### Deutschland

Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
20539 Hamburg  
www.drweigert.de